

■测定对象・前处理设备・测定成分

G T N－B						
测定对象	前处理设备	测定成分				
		水分	总氮量	中性洗涤纤维(含灰)	咖啡因	茶多酚
红茶	粉碎机	●	●	●	●	●

注 1) ●印部分表示测定可能。
2) 使用干物基准的方法换算数值。
3) 其它成分也在开发中。

■式样

型 式	G T N－B
测 定 方 式	近红外线扩散反射测定方式
测 定 对 象	红茶
测 定 时 间	样品仓关闭后大约15秒
前 处 理	使用指定粉碎机粉碎
尺 寸	宽400mm × 高354mm × 内362mm
质 量	约14.6kg (仅主机)
电 源	AC100V (50/60Hz)
消 耗 电 力	100W
测 定 环 境	周围温度 10° ～ 35° 相对湿度 25% ～ 80% 避免日光照射
保 存 温 度	0° ～ 50°
付 属 品	装料盘，刷子，清扫用刷子，螺丝刀，备用保险丝，接地线，专用打印机， 打印机连接线，打印纸，试样瓶12个
	试料盒
选项	粉碎机・集尘机（电气吸尘器）

※请注意以下情况可能导致测定不准确。
①混入添加物的情况下。②着色了的情况下。

※由于机器改良会发生机器式样及外形变更的情况，请您予以理解。

川崎机工株式会社

网址 <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>

◎营业本部

〒436-0005 静冈县掛川市伊達方滑川810-1

TEL+81-537-27-1712(代)

茶机・售后

〒436-0005 静冈县掛川市伊達方滑川810-1

TEL+81-537-27-1711(代)

采摘・售后

〒436-0005 静冈县掛川市伊達方滑川810-1

TEL+81-537-27-1765(代)

业务课)

〒436-0005 静冈县掛川市伊達方滑川810-1

TEL+81-537-27-1152(代)

销售一课

〒436-0005 静冈县掛川市伊達方滑川810-1

TEL+81-537-27-1712(代)

关西营业所

〒519-0165 三重县亀山市野村4-3-5

TEL+81-5958-2-0639(代)

九州支店

〒899-2704 鹿児島县鹿児島市春山町2004-3

TEL+81-99-246-7200(代)

宫崎营业所

〒844-0005 宫崎县儿汤郡高锅町持田3367-18

TEL+81-983-22-2465(代)

大隅营业所

〒899-8102 鹿児島县曾於市大隅町岩川7391-3

TEL+81-994-82-1072(代)

南薩营业所

〒891-0705 鹿児島县南九州市穎娃町上別府4850-1

TEL+81-993-39-1046(代)

福岡营业所

〒834-0016 福岡县八女市丰福77-1

TEL+81-943-22-5151(代)

经销店



PRODUCTS CATALOGUE

茶叶成分分析仪 GTN-B

近期投放
欢迎订购!!

红茶成分分析仪

主要成分瞬间测定
最适宜红茶的质量评定!!



制造商
销售 / 售后服务

静岡製機株式会社
川崎机工株式会社


茶叶成分分析仪 GTN-B

快速！安全！！简单！！！！
可以对**红茶**的成分进行分析

特 长

- 谁都可以对品质进行评定，而且可以迅速・安全・简单的对成分进行分析。
- 主要成分高精度瞬间测定。
水分，总氮量，中性洗涤纤维（含灰），咖啡因，茶多酚
- 采用触屏式操作，操作简单，测定结果也是一目了然。
- 主体，专用小型打印机可以用日文/英文/中文显示选择可能。

测定精度可信赖

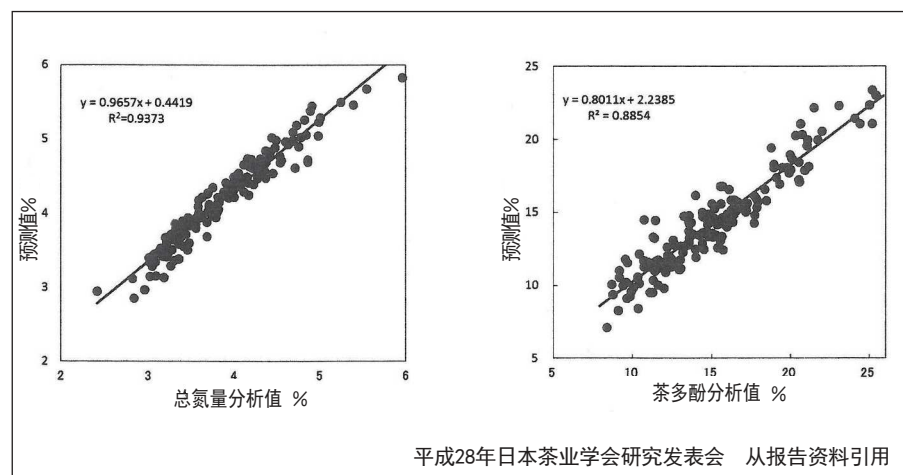

茶叶品质评定比较

	感官 审查	化学 分析	茶叶 成分 分析仪
迅速性	◎	×	◎
安全性	△	×	◎
简便性	△ (※)	×	◎
客观性	△	◎	◎
再现性	△	◎	◎

※无需特殊设备和器具，只需熟练操作。

GTN-B 打印例子

茶叶成分分析仪	
测定结果	
测定日	2016/10/28 13:10:10
测定对象	红茶
样品 I D	123456
客户 I D	123456
水分	3.5 %
总氮量	3.9 %
纤维	21.3 %
咖啡因	2.1 %
茶多酚	13.2 %
成分值的水分基准为0.0%。	
等级表: 0000年O茶期	

无论谁都能对
红茶成分进行测定



测定方法

红茶の場合

