



Shizuoka Seiki
&
KAWASAKI

Windows10対応

茶成分分析計専用 解析ソフト

T-Card3

対応機種：GT-8 RT-3 GTN-9 RTN-7

お待たせしました。遂に新型T-Card登場。

茶成分分析システム ◆◆T-Card3◆◆

煎茶 煎茶無粉碎 乾燥生葉

バックアップ・復旧 T-Print ランクテーブル出力 マスター登録 Windowsへ戻る

茶成分分析システム ◆◆T-Card3◆◆煎茶

サンプルNo	20160003	茶種	普通煎茶
サンプルID	SM4	形状	1.0
カタゴリーID	marumaru	色沢	2.0
測定日	2016/11/03	香気	1.0
受付No	234	氷色	3.0
仕入先No	1	滋味	4.0
仕入先名	〇〇茶業工場	評価合計	11.0
号数	77	総合評価	1.0
区分	煎茶仕入	単価/kg	2,000
品種	やぶきた	単量	60
産年	平成27年	合計金額	168,000
茶期	1番茶	備考	

水分	4.2 %	2	全窒素	5.7 %	2
遊離ア/酸	3.3 %	2	テアニン	1.7 %	2
繊維	16.7 %	1	タンニン	14.0 %	3
カテキン	13.6 %	3	カフェイン	2.8 %	3
ビタミンC	0.53 %	1			

AFスコア 52 点 1

AFスコア 120

製品名 T-Card3

- ・特徴 上記対応機種 of 茶成分分析計と接続し、測定データの保存・データ解析ができます。単票印刷、日報印刷、CSV形式出力が可能です。Windows10 Professional に対応しています。
- ・製品に関するお問い合わせはカワサキ機工株式会社までご連絡ください。

製造元

静岡製機株式会社

販売・保守

カワサキ機工株式会社

特販支援室 TEL: 0537-27-1753

T-Card3 でできること

- 煎茶 Udy 粉砕分析
- 煎茶無粉砕分析
- 生葉ミジンカッター分析
- 乾生 Udy 粉砕分析

測定データ取込み データベース保存

サンプル分析・情報

- ① 単表印字
- ② 日報印字
- ③ 画面印刷




茶成分分析結果表 (煎茶)			
サンプル情報			
サブ ANo	1222019	受付No	9999999
サンプルID	4	品種	やぶきた
カテゴリID	4	産年	平成26年
測定日	2008/12/22	茶期	1番茶
区分名	カテゴリ4	茶種	仕入煎茶1
仕入先No	6	形状	3.0
仕入先名	仕入先名6	色沢	2.0
号数	9999	香気	3.0
		水色	4.0
		滋味	2.0
		評価合計	14.0
		総合評価	14.0
		単価/kg	2,000
		重量	30
		会社金額	60,000
		備考	サンプルデータ

成分測定値						
成分名	測定値	ランク	少ない	やや少	普通	やや多
水分	1.9%	5	★			
全窒素	5.1%	3			★	5.5%以上
遊離アミノ酸	2.7%	3			★	3.0%以上
テアニン	1.3%	3			★	1.5%以上
繊維	20.2%	3			★	20.0%以下
タンニン	13.2%	3			★	
カテキン						
カフェイン	2.2%	3			★	
ビタミンC	0.46%	2				★ 0.4%以上

評価項目	評価	ランク
AFスコア	33点	3

データ解析

- ① 一覧表表示/印刷/CSV出力
- ② 平均値一覧表
- ③ グラフ表示
 - 棒グラフ
 - 散布図
 - ヒストグラム

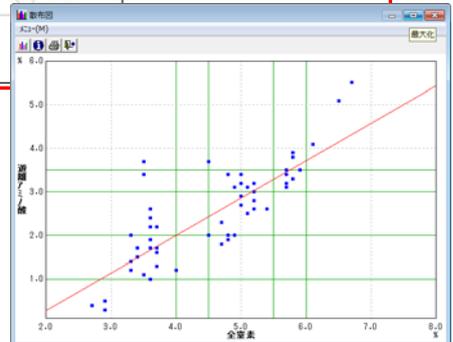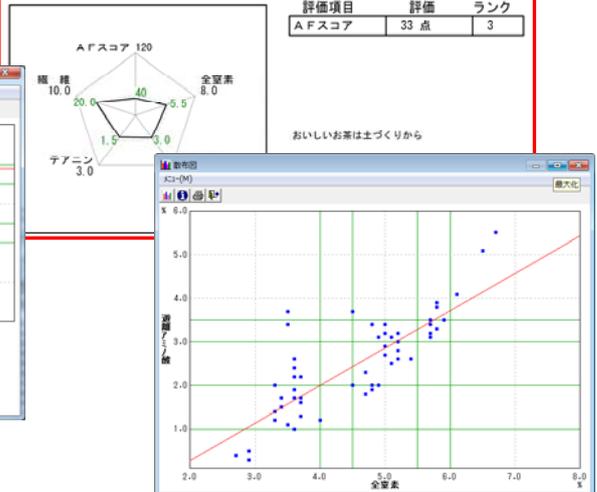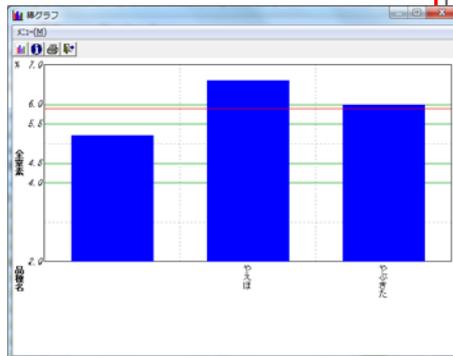

④ ランク設定

測定対象	スコアタイプ	ランク1	ランク2	ランク3	ランク4	ランク5	ランク6	ランク7	ランク8	ランク9	ランク10
煎茶	AFスコア	50	40	30	20	0	0	0	0	0	0
煎茶 無粉砕	NF指標	85	85	45	30	0	0	0	0	0	0
乾燥生葉	NF指標	85	85	45	30	0	0	0	0	0	0
生葉	NF指標	86	77	68	59	50	41	35	29	23	0

その他

- ① マスター登録・メンテナンス
- ② データバックアップ/復旧